



智能畜牧專家



波克生醫股份有限公司

台灣總代理

版權所有© 2019 SCR Engineers Ltd. 此處包含資訊若有更改，恕不另行通知。SCR 產品及相關服務已明確列於保固聲明，此處包含資訊不應被視為額外保固。SCR 對此處技術或編輯錯誤保有最終修改之權力。

NCC證號:

SenseHub控制器 CCAB18LP1890T1 SenseHub天線 CCAB18LP189AT3 SenseHub分隔門控制器 CCAB18LP189BT BU500E天線 CCAB16LP308AT1
eSense耳標 CCAB18LP1900T4 cSense頸圈 CCAB18LP1910T7



波克生醫官網 www.pocmedical.com.tw
波克生醫股份有限公司 總代理
POC Medical Inc.
(04) 885 5173
彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



An Antelliq company

新一代 乳牛健康管理系統



SCR乳牛健康管理系统已監測全球超過六百萬頭牛隻，透過收集並分析個別牛隻的反芻及活動數據，即時提供您完整的發情、健康、營養及動物福祉資訊。SCR自小牛出生第一天即可開始監控，完整掌握牛隻所有狀態，幫助您輕鬆管理，達到牧場最大效益。

發情監測

SCR健康管理系統利用活動量、反芻時間、採食行為及其他關鍵行為提供您精準的發情偵測，同時提高靜默發情偵測率並減少誤判。您可透過系統提示的最佳輸精時間進行配種，減少人工觀察發情的時間成本及不確定性。

利用SCR可以有效地減少產犢間隔及空胎日數，並降低對發情同期化的依賴。讓您以對牛群影響最小的方式提高繁殖效率並加快牛群遺傳性狀改善。

發情應用報告包含：發情報告、不規則發情、疑似流產及乏情牛報告。

健康監測

SCR健康管理系統可以幫助酪農即早發現牛隻健康問題，如亞臨床酮症、子宮炎、乳房炎等，避免惡化成第四胃異位或嚴重代謝疾病。也可以利用反芻曲線評估治療效果，找出有效治療方案並減少不必要的過度治療。

SCR可24小時監控牛隻健康狀況，針對分娩前後的高風險時期提供即時資訊，並提示您真正需要關注的牛隻，盡量減少對其他健康牛隻的人為干擾，降低牛隻緊迫，增加躺臥休息時間。

健康應用報告包含：健康報告、新產牛報告、牛隻異常報告和牛隻異常警示。

群組和營養監測

SCR健康管理系統除了不間斷地監控個別牛隻行為，也會顯示牛群活動量、反芻和喘息的即時狀況，讓酪農及管理者可以快速地進行牛隻福祉、營養、熱緊迫等相關牧場管理決策。

營養 – 群組反芻報告可以顯示牛群對營養改變的真實反應，例如新供應商、乾草品質、添加劑效用、飼料毒素和日糧配方更改等等，協助您在最短的時間內修正營養策略；長期反芻趨勢可提供營養師和牧場管理者不同的視角來檢視牧場的營養策略。透過即時和長期反芻變化，幫助酪農從營養層面改善牛群健康、繁殖效率及乳產量。

環境 – 群組熱緊迫報告顯示牛群在不同時間喘息、採食和反芻的狀況，搭配群組反芻及活動量一致性報告可以了解環境和管理對牛隻是否造成緊迫，例如畜舍散熱不佳、躺臥舒適度、擠乳室環境緊迫、過度人員干擾和牛隻分群策略等，提供您中立客觀地資訊進行改善，並制定計劃避免問題再次發生。

群組應用報告包含：群組熱緊迫報告、群組反芻一致性報告和群組日常報告。



群組反芻報告



發情曲線圖



生病牛隻反芻曲線



群組反芻一致性



活動量/反芻變化曲線



群組熱緊迫



為您的牛群選擇最適合的解決方案

選擇應用方案



初階

- 發情報告
- 不規則發情報告
- 疑似流產報告
- 乏情牛報告



頂級

- 初階全部功能及
- 反芻曲線
- 健康報告
- 新產牛報告
- 牛隻異常警報
- 群組熱緊迫報告
- 群組一致性報告
- 群組日常報告



小牛

- 小牛專用健康報告
- 24小時快速建立健康曲線
- 監控小牛反芻建立



搭配不同行動裝置使用

選擇管理系統



SenseHub 雲端版本

可外加天線

以色列
服務支援中心

第三方
管理系統

手機App



HTpro+ 全功能管理版本

選擇感測器



耳標感測器 (E型)

尺 寸: H 68 / W 38 / D 15(mm)
重 量: 25克
保 固: 2.5年



頸圈感測器 (C型)

尺 寸: H 84 / W 64(mm)
重 量: 98克
保 固: 5年

分級管理牛群，靈活運用軟體等級



初階

SCR初階方案提供繁殖配種監控，透過多項數據準確計算牛隻發情並預測排卵時間，讓您省時省力提高母牛受孕率。



頂級

SCR頂級方案不只提供繁殖配種監控，還可以監控個別牛隻反芻和牛群營養和環境緊迫，讓泌乳牛群受到最完整的照顧。

充分發揮小牛潛力，維持最佳生長曲線



小牛

SCR小牛方案可以從小牛出生到六月齡進行專屬仔牛的健康監控，提早發現健康問題、早期治療並檢驗治療是否有效。幫助您減少藥物使用，降低對小牛的肝腎負擔，同時還可以監控離乳時期的反芻建立，透過雙重功能有效提高育成率。



專為酪農設計 榨乳健康管理系統



專注動物識別科技 60 年

乳量即時回饋 精準控制脈動及脫杯時間


Data Flow II 除了活動量、反芻和喘息數據，
更加入乳量作為健康偵測的參數，以即時、簡單的報
告和警報呈現給管理者，為牧場提供完整的解決方案

提供您客觀地資訊進行決策、幫助您節省時間及成本
系統支援榨乳室螢幕、分選門、自動餵飼和第三方管
理系統



產品特點

精準的脈動控制 · 自動刺激按摩，促進下乳	易損零件少 維護成本極低	節省20%榨乳時間 · 避免過榨導致乳頭損傷	單鍵操作 使用簡單
即時榨乳監控 · 踢杯及低奶量警報 · 自動脫杯	減少清洗用水 和清洗劑(酸鹼)	簡單易懂地 用戶介面	靈活配置 後續升級容易

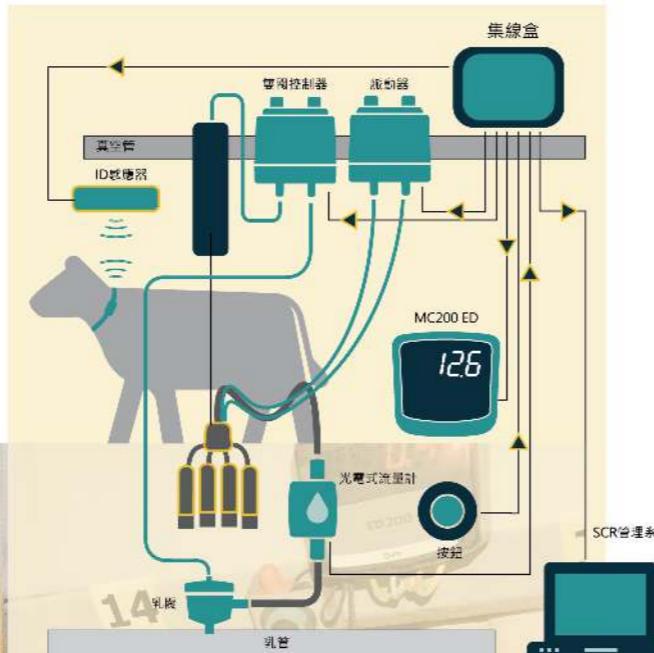

歐洲進口材料 抑菌特殊處理

針對牧場動物設計，特殊材質可抑菌、抗老化、抗紫外線
可客製化雷射刻字，加強牧場管理

標準電子耳標組

*HDX (半雙工) / FDX (全雙工) 可選

- 藍
- 紫
- 紅
- 黃
- 綠
- 粉
- 白
- 橘

*多種耳標顏色



(開口 BRO)

Ø30.5mm 8.5g
◎可重複使用



(防篡改 BER)

Ø30.5mm 8.6g
◎防篡改鎖扣設計，單次使用

牛用耳標



二種規格
HDX(半雙工)
FDX(全雙工)

二合一電子耳標
(防篡改)



114*76mm 11g
84*62mm 6.29g


A-tag



99*75mm
11.4g

78*57mm
6.2g

耳標鉗

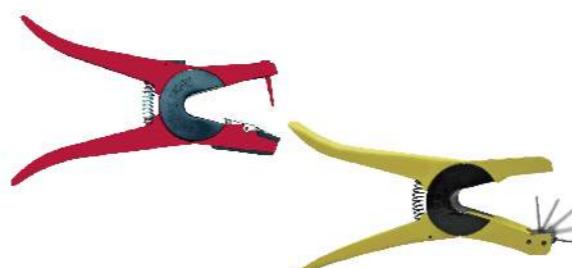

RS420 電子耳標讀取器

*支援長距離(42cm)讀取電子耳標及
手機APP連線使用



耳標剪斷器



*專利 V型刀片設計，輕鬆安全剪斷耳標

專用耳標筆

