

仔豬處理省工工作車台

基本全方位護理 有針版 12萬

配備

- 1 仔豬處理省工工作車台 * 1
- 2 注射器支架 * 2
- 3 免手持有針注射器 * 2 (1ml&2ml各一)
- 4 免手持自動餵食器 * 1
- 5 藥袋 * 1 6 保定架 * 1 7 仔豬籃 * 1
- 8 進口電熱剪尾器 (含固定架) * 1 + 專用加熱片 * 1
 - 無線磨牙機 * 1 • 複合式閹割鉗 * 1 • 碳鋼刀片 (No24) * 1

複合式閹割鉗

用於新生仔豬快速閹割




碳鋼刀片 (No24)



無線磨牙機

可快速無痛地研磨新生仔豬的牙齒

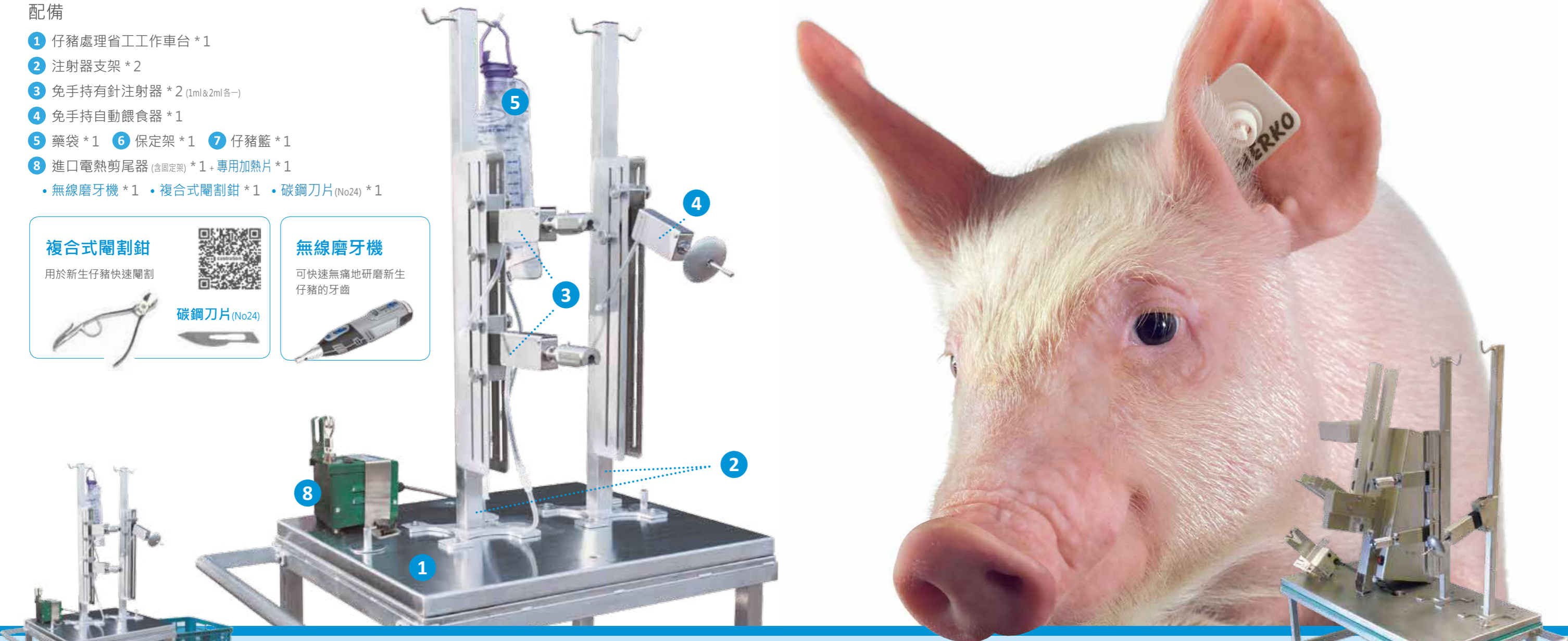

- ◆ 想要同時注射和灌餵各種液劑？
- ◆ 想要剪尾？ ◆ 想要去勢？
- 想要有這些功能需身上帶多種工具？
- 不用！您只需要一台仔豬處理省工工作車

www.pocmedical.com.tw
 波克生醫股份有限公司
 POC Medical Inc.
 (04) 885 5173
 彰化縣溪湖鎮美溪路一段30號



歡迎加入波克家族

LINE@

Comfort Trolley 多功能仔豬工作車

仔豬處理省工工作車台

無針避免交叉感染

無針版 **28萬**

配備

- 1 仔豬處理省工工作車台 * 1
- 2 注射器支架 * 1
- 3 免手持有針注射器 * 1
- 4 免手持自動餵食器 * 1
- 5 藥袋 * 1
- 6 保定架 * 1
- 7 仔豬籃 * 1
- 8 進口電熱剪尾器 * 1
- 9 第二代無針注射器(免手持型) * 1
- 高壓汽缸 * 1

好行動搭配 (另售)


無針手持注射槍 + 無針背帶組



電燒新生仔豬尾巴
(含專用固定架)



電熱剪尾器

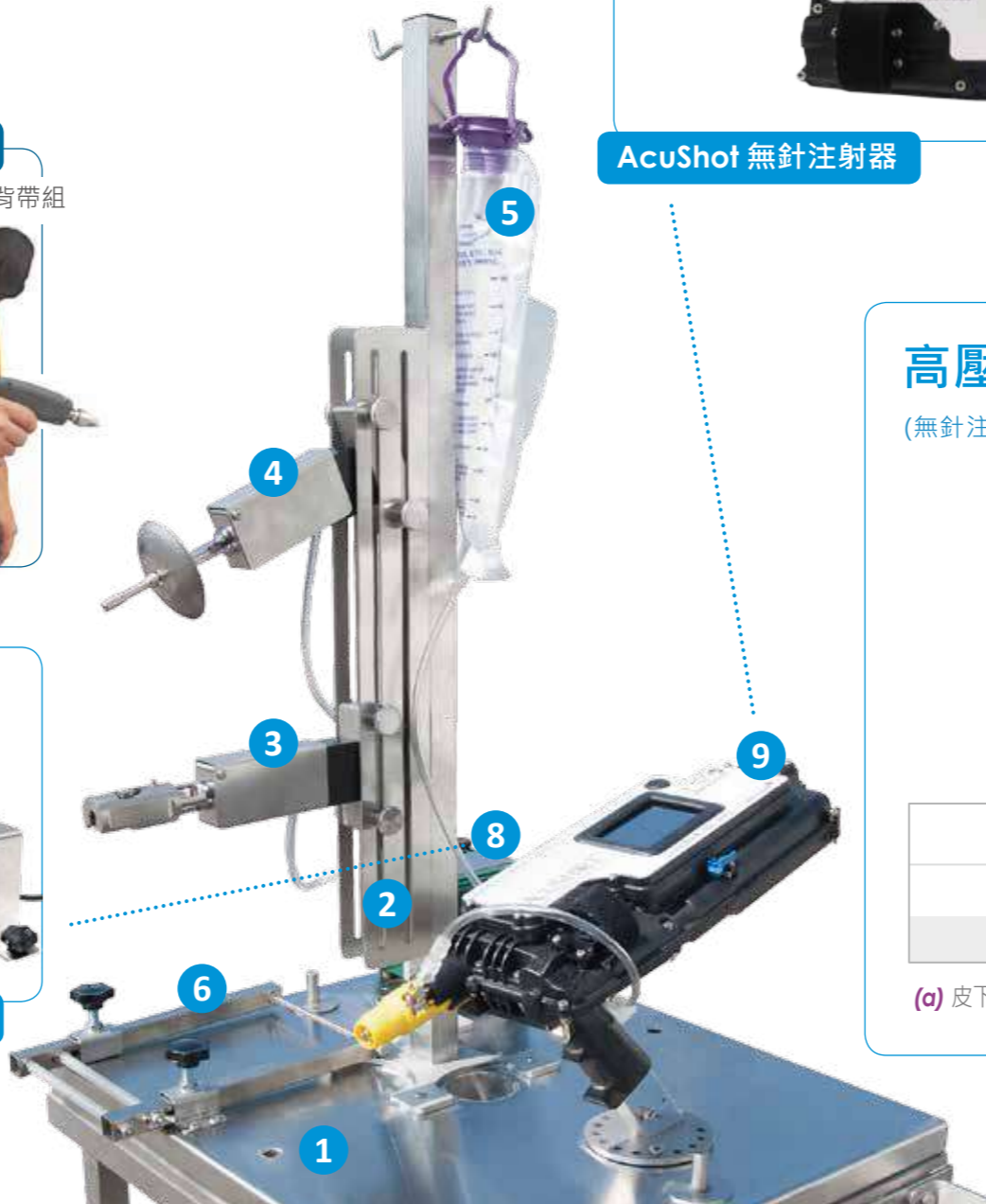

AcuShot 無針注射器



高壓氣缸

(無針注射器專用)

小到大壓力顏色區分：粉紅 < 綠 < 藍

可使用次數：約5萬次 約5萬次 約5萬次



豬齡範圍	豬齡和劑量	豬重(kg)	皮內注射	皮下注射	肌內注射
新生	1-7 日齡	1.3-2.25	粉紅	粉紅(a)	粉紅或綠
仔豬	1-3 週齡	3.2	綠	綠或藍(a)	綠或藍

(a) 皮下注射時，必須考慮注射部位的選擇，技術和劑量，通常與傳統有針做法類似的注射位置效果很好。



7 仔豬籃

- 仔豬放置區



(顏色依現貨為主)

免手持注射器

- 方便施打鐵劑或疫苗
- 準確劑量
- 處理過程減少仔豬緊迫




免手持餵食器

- 準確劑量
- 處理過程減少仔豬緊迫



保定架

- 仔豬閹割固定使用

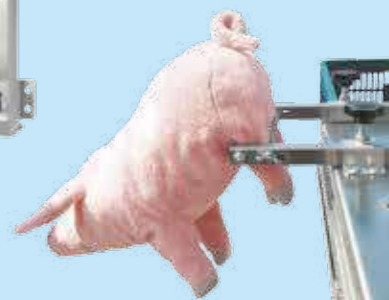

產品操作影片